

LMArte

LM

feel the
difference



Искусство реставрации

LMArte



Успешная реставрация с LMArte

LM-Arte - это набор инновационных инструментов для эстетической реставрации, разработанный специально для послойной техники работы с композиционными материалами. Каждый инструмент имеет цветовую кодировку и название, отражающее его основную функцию, чтобы сделать работу стоматолога еще более простой, быстрой и эффективной.

Инструменты LM-Arte были разработаны в сотрудничестве со Style Italiano - группой стоматологов и исследователей, специализирующихся на эстетической стоматологии.

Инструменты изготовлены из высококачественной стали LM-DuraGradeMax и обладают исключительным качеством полировки.

LMArte от Style Italiano

Разработчики:
Walter Devoto DDS
Angelo Putignano MD, DDS



Style Italiano - это группа практикующих стоматологов и исследователей специализирующихся на эстетической стоматологии. Используйте QR-коды для получения более подробной информации.



Посмотреть подробную информацию и видео вы можете отсканировав QR -код или перейдя на сайт www.lm-dental.com/ LMArte





LM-Arte Applica

LMErgoSense	LM 46-49 ES
LMErgoMax	LM 46-49 XSI




LM-Arte Fissura

LMErgoSense	LM 481-487 ES
LMErgoMax	LM 481-487 XSI



LM-Arte Applica
Twist

LMErgoSense	LM 464-494 ES
LMErgoMax	LM 464-494 XSI

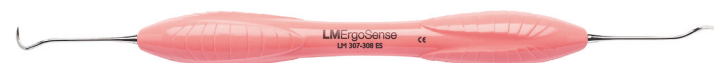

LM-Arte Eccesso

LMErgoSense	LM 307-308 ES
LMErgoMax	LM 307-308 XSI



LM-Arte Modella

LMErgoSense	LM 442-443 ES
LMErgoMax	LM 442-443 XSI



LM-Arte Condensa

LMErgoSense	LM 488-489 ES
LMErgoMax	LM 488-489 XSI



LM-Arte Misura

LMErgoSense	LM 496-497 ES
LMErgoMax	LM 496-497 XSI



LM-Arte Posterior
Misura

LMErgoSense	LM 498-499 ES
LMErgoMax	LM 498-499 XSI

Варианты ручек:

LMErgoSense



Большой диаметр и улучшенный дизайн обеспечивают сенсационное удобство работы, доказанное клиническими тестами. Ручка может быть оснащена уникальным чипом RFID - подробнее www.dentaltracking.com. Диаметр Ø 13.7 мм

LMErgoMax



Классический эргономичный дизайн, который отлично подходит для любых стоматологических процедур и гарантирует идеальную тактильную чувствительность. Диаметр Ø 11.5 мм


Набор LM-Arte

Включает: LM-Arte Applica, LM-Arte Condensa, LM-Arte Fissura, LM-Arte Misura и LM-Arte Eccesso в кассете LM-Servo 5.

LMErgoSense	LM 6840 ES
-------------	------------


LMErgoMax	LM 6840 XSI
-----------	-------------



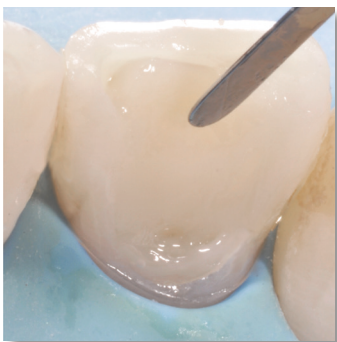



Аккуратное внесение LM-Arte Applica

Очень тонкая и гибкая гладилка предназначена для внесения и эстетического моделирования композитного материала. Гибкие рабочие части аккуратно и точно формируют слои композита, повторяя естественную форму зуба. Тонкие рабочие части позволяют работать в узких пространствах и рядом с матрицами.

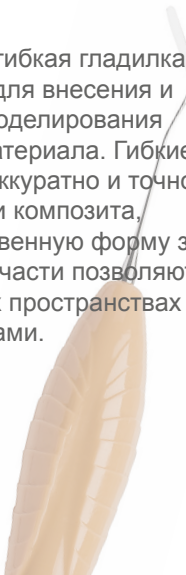

Удобный доступ LM-Arte Applica Twist


Особенно узкая, тонкая и гибкая гладилка для моделирования композита. С помощью Applica Twist очень легко работать в апроксимальных областях и по краям матриц. Развернутые рабочие части позволяют работать в труднодоступных областях, сохраняя удобное положение руки.

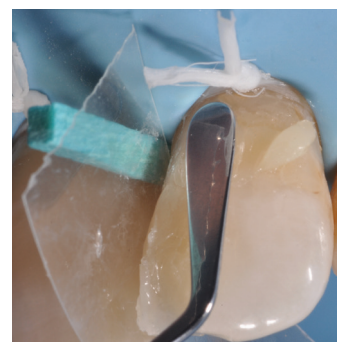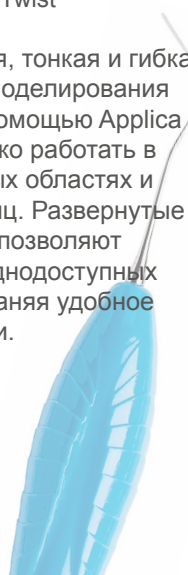


Гибкая моделировка LM-Arte Modella

Очень тонкая и расширенная гладилка для моделирования композита. Идеально подходит для работы на больших поверхностях зуба, таких как щечные поверхности резцов. Широкая рабочая часть эффективно разглаживает композит. Гибкость и изящество рабочих частей помогают создать точную, эстетическую реставрацию.

Гладилкой удобно брать композит из шприца.

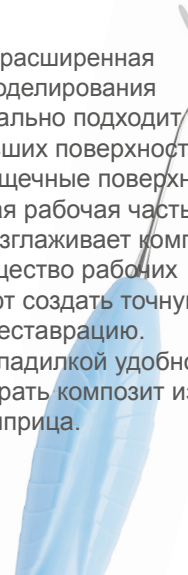


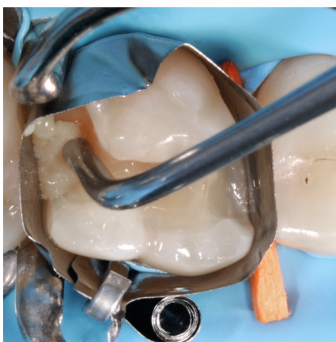

Деликатное уплотнение

LM-Arte Condensa


Длинный закругленный шпатель разработан специально для моделировки композита. Изгиб плеча обеспечивает неограниченный доступ ко всем полостям. Рабочие части разной толщины позволяют работать в полостях разных размеров, как на фронтальных, так и на боковых зубах. Закругленный кончик обеспечивает деликатную конденсацию без прилипания материала.

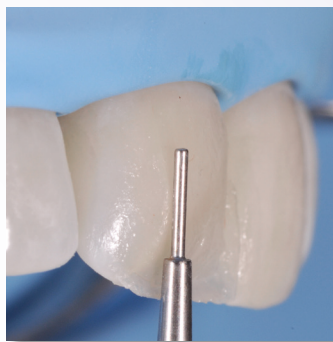

Точное измерение

LM-Arte Misura

Уникальный инструмент для горизонтального и вертикального измерения толщины композитных слоев при фронтальных реставрациях. После наложения слоя дентинного композита, но до полимеризации, более тонкая рабочая часть конической формы помещается на натуральную эмаль зуба. Таким образом, незатвердевший композит, оставшийся под рабочей частью, будет аккуратно смоделирован, оставляя оптимальное пространство для следующего слоя. Более толстая и короткая рабочая часть помещается горизонтально на край подготовленной полости, так чтобы край рабочей части оставался на натуральной эмали. Это поможет определить оптимальное количество прозрачного композита для финишного слоя. В результате в реставрации будет идеальное соотношение опаковых и прозрачных композитов, что позволит избежать появления неприятного серого оттенка.

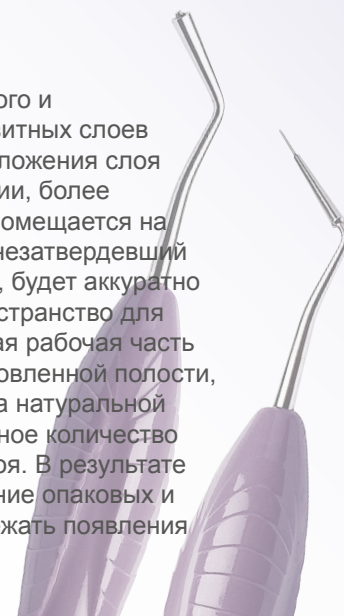


НОВИНКА!



Удобная моделировка и измерение

LM-Arte Posterior Misura

Версия популярного инструмента Misura для боковых зубов. Разработан для горизонтального и вертикального измерения толщины композитных слоев при реставрации премоляров и моляров. Рабочая часть в виде вилки позволяет моделировать и измерять композит даже при установленной матрице.


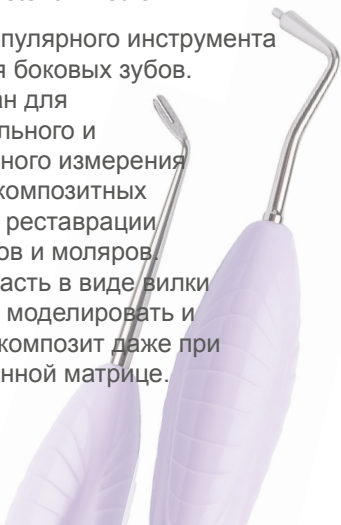


Изящная моделировка

LM-Arte Fissura

Инструмент для моделировки с тонкими заостренными кончиками. Коническая рабочая часть позволяет воссоздать анатомию окклюзионной плоскости премоляров и моляров всего одним инструментом. Тонкий, похожий на зонд, рабочий кончик оптимален для моделировки фиссур и мамелон, а также нанесения

красителей. Инструмент Fissura помогает найти излишки бондинга на поверхности зуба.

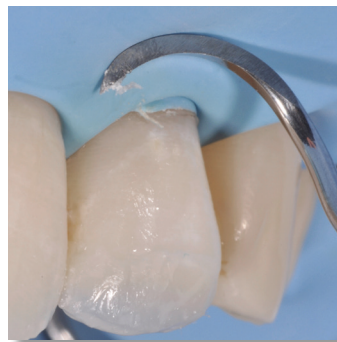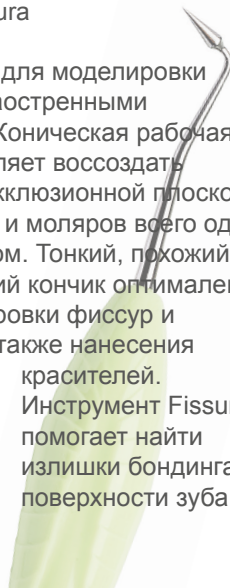


Аккуратное удаление

LM-Arte Eccesso

Инструмент разработан для удаления остатков композита и бондинга. Угол рабочих частей позволяет работать в пришеечной зоне фронтальных зубов, а также удалять излишки из интерпроксимальных промежутков между молярами. Рабочие части этого тонкого, но жесткого инструмента обладают

оптимальной длиной, толщиной и шириной.

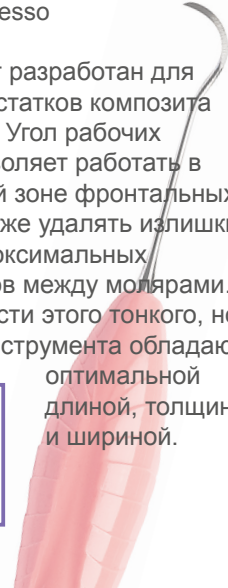


Улучшайте реставрацию с помощью набора LM-Gengiva

Инструмент LM-Gengiva и ретракторы идеальны при проведении реставраций в пришеечной области, они не травмируют мягкие ткани и позволяют получить наилучший результат.



Десневые ретракторы

- Жесткие пластиковые насадки обеспечивают хорошую ретракцию, но при этом обладают гибкостью и адаптируются к давлению
- Обеспечивают хороший контраст
- Можно изменить форму с помощью бора для работы на вогнутых или выпуклых поверхностях
- К ретракторам не прилипает материал
- Одноразовые
- Не полимеризуются

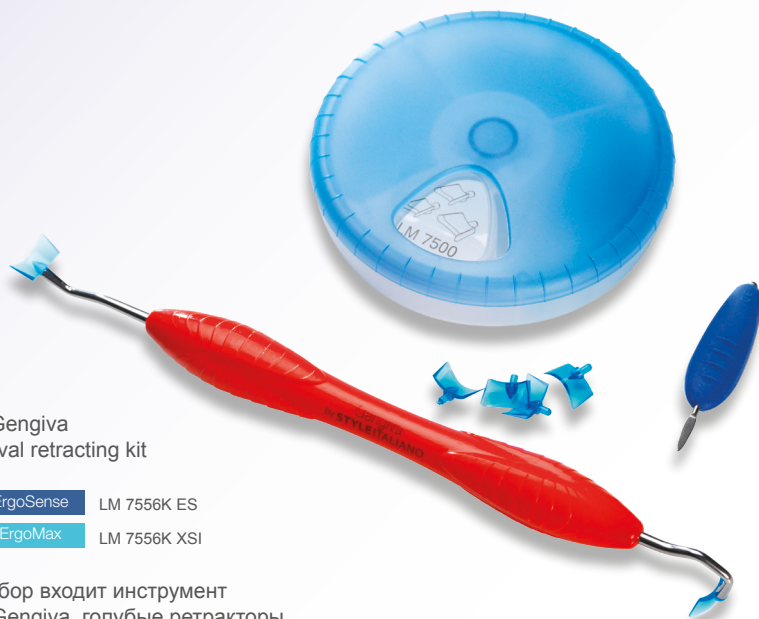

LM-Gengiva
gingival retracting kit

LMErgoSense LM 7556K ES

LMErgoMax LM 7556K XSI

В набор входит инструмент LM-Gengiva, голубые ретракторы (90 шт., 30 шт. каждого размера) и нож LM-MultiLever для удаления насадок

LMDental

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Обратитесь к местному дистрибьютору!